

Stérilisation et solutions de
gestion des matériaux





Le cœur de votre pratique.

La protection des patients va au-delà des processus et des protocoles. Il s'agit de l'objectif et du lieu qui permet d'accélérer la gestion des matériaux et rationaliser le flux de travail. Cela tient compte de la durabilité de la résistance aux environnements dentaires humides et difficiles. Cela contribue également à garantir la conformité en guidant intuitivement et en toute sécurité l'équipe dentaire, tout au long du processus de stérilisation. C'est une grande responsabilité. Mais avec plus de cinq décennies d'expérience dans le secteur dentaire, les conceptions réfléchies basées sur la façon dont les équipes dentaires pratiquent sont une seconde nature pour A-dec®.

Nous avons amené le centre de stérilisation à un niveau supérieur avec des unités modulaires, configurables de manière exponentielle, qui s'arrêtent et démarrent lorsque nécessaire, et s'adaptent à n'importe quelle surface, grande, petite ou irrégulière. En fin de compte, le centre de stérilisation peut être considéré comme le cœur de la pratique, mais le personnel est au cœur du secteur dentaire. Rien n'est plus important que de vous protéger, vous et vos patients.



STÉRILISATION APPROFONDIE.

Le contrôle des infections devient de plus en plus public, le centre de stérilisation ne doit plus être caché dans l'arrière-salle. De nombreux patients demandent à visiter lorsqu'ils se rendent dans un cabinet potentiel. Même s'ils ne sont pas experts en matière de lutte contre les infections, les patients avertis peuvent faire la différence entre un processus bien organisé et hygiénique et un processus qui peut les exposer à des dangers indésirables.

Lorsque les matériaux se déplacent efficacement, il en est de même pour vous.

Les centres de stérilisation A-dec sont organisés en espaces de travail fonctionnels, avec des zones spécifiques pour la réception, le nettoyage, la préparation, l'emballage, la stérilisation et le stockage. Vous pouvez facilement regrouper les étapes connexes et simplifier l'ensemble du processus de stérilisation. La conception du mobilier suit le protocole recommandé par le CDC, pour obtenir un processus sûr et cohérent et rationalisant le flux de matériaux : Charger les matériaux et les instruments directement depuis le centre de stérilisation ou le stockage stérilisé, les livrer à la salle de traitement et renvoyer les matériaux utilisés pour se faire traiter. Tout est en place et prêt quand vous l'êtes, ce qui optimise la main d'oeuvre, un des coûts les plus importants





Créer un environnement plus sûr et plus efficace.



RÉCEPTION DES INSTRUMENTS

Dans ce domaine à fort taux de rotation, une conception ordonnée avec une entrée et une sortie clairement définies permet de rationaliser le flux d'instruments et d'accroître l'efficacité. Des espaces réservés aux instruments sales permettent d'éliminer le désordre lorsque vous êtes pressé.




PROTÉGER LES OPÉRATEURS

L'insert rouge indique une contamination. L'insert bleu indique que l'élément est propre. Grâce à des repères visuels et à des espaces de stockage séparés, les travailleurs dentaires réduisent les risques de contamination croisée ou d'exposition accidentelle à des micro-organismes et à des contaminants.



GESTION DES DÉCHETS

Des conteneurs désignés permettent à l'équipe dentaire de séparer en toute sécurité les objets tranchants, les déchets biologiques et les déchets, ce qui simplifie la gestion des déchets et le respect des consignes de sécurité.

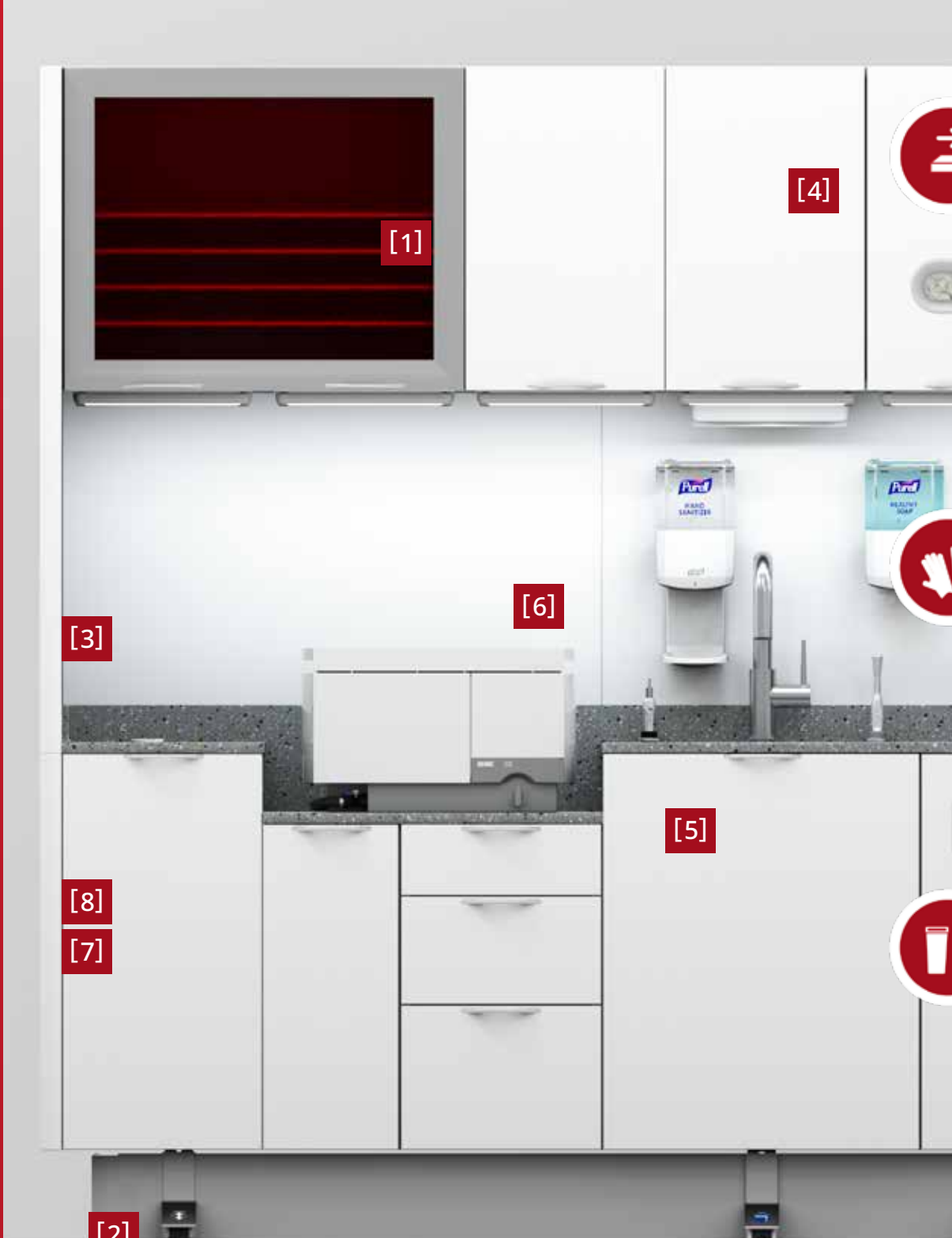



[1] RÉDUISEZ LES POINTS DE CONTACT

Lorsque vous êtes trop occupé pour commencer le traitement immédiatement, la zone de réception supérieure activée par une commande au pied stocke les articles sales et maintient la zone de stérilisation libre de tout encombrement.



[2] GARDEZ LES MAINS LIBRES

Utilisez la commande au pied pratique pour accéder au compartiment de stockage supérieur tout en tenant les plateaux d'instruments souillés.



[3] RÉDUISEZ LA CONTAMINATION

Une distance de sécurité entre la zone de réception temporaire et la table de laboratoire offre beaucoup d'espace pour travailler.



[4] RANGEZ L'ESPACE DE TRAVAIL

Des supports stratégiquement situés permettent de garder à portée de main les gants appropriés pour les tâches de stérilisation.



[5] CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ

Accédez et stockez facilement aux gants résistants aux perforations et aux produits chimiques.



[6] ACTIVATION MAINS LIBRES

Le distributeur de savon activé par le mouvement élimine un point de contact supplémentaire, pour réduire le risque de contamination croisée.




[7] ÉLIMINATION DES OBJETS TRANCHANTS

Vous avez oublié de jeter les objets tranchants dans la salle de traitement? Pas de problème. Le conteneur de secours est là quand vous en avez besoin.



[8] SÉPAREZ LES DÉCHETS

Des conteneurs de mise au rebut stratégiquement situés séparent les objets tranchants et les déchets biologiques des déchets ordinaires pour une élimination appropriée. Activation mains libres.

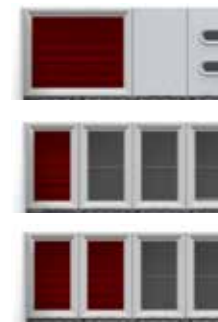

BÉNÉFICIER D'OPTIONS SUPÉRIEURES :

Ouverture automatique
(mains libres) 71,1 cm (28 po)

Ouverture manuelle 35,5 cm
(14 po)

Ouverture manuelle 71,1 cm
(28 po)



FLEXIBILITÉ PERSONNALISABLE

Si vous ne souhaitez pas d'inserts rouges ou bleus, vous pouvez en choisir un qui s'agence à vos autres armoires. Le choix vous appartient.



PRÉTREMPAGE

Lorsque les instruments ne peuvent pas être traités immédiatement, il faut un endroit désigné pour les stocker, et encombrer la table de laboratoire n'est pas une bonne idée. Les tiroirs de prétrempage empêchent la charge biologique de sécher jusqu'à ce que vous puissiez terminer le cycle.




NETTOYAGE

Le nettoyage est l'une des étapes les plus critiques du retraitement des instruments. Des zones clairement désignées empêchent les instruments et les matériaux sales de contaminer les autres zones du centre de stérilisation.



RINÇAGE

L'espace nécessaire pour rincer correctement les cassettes, les paniers ou les articles de grande taille sans éclaboussures est essentiel à cette étape importante du processus de nettoyage.

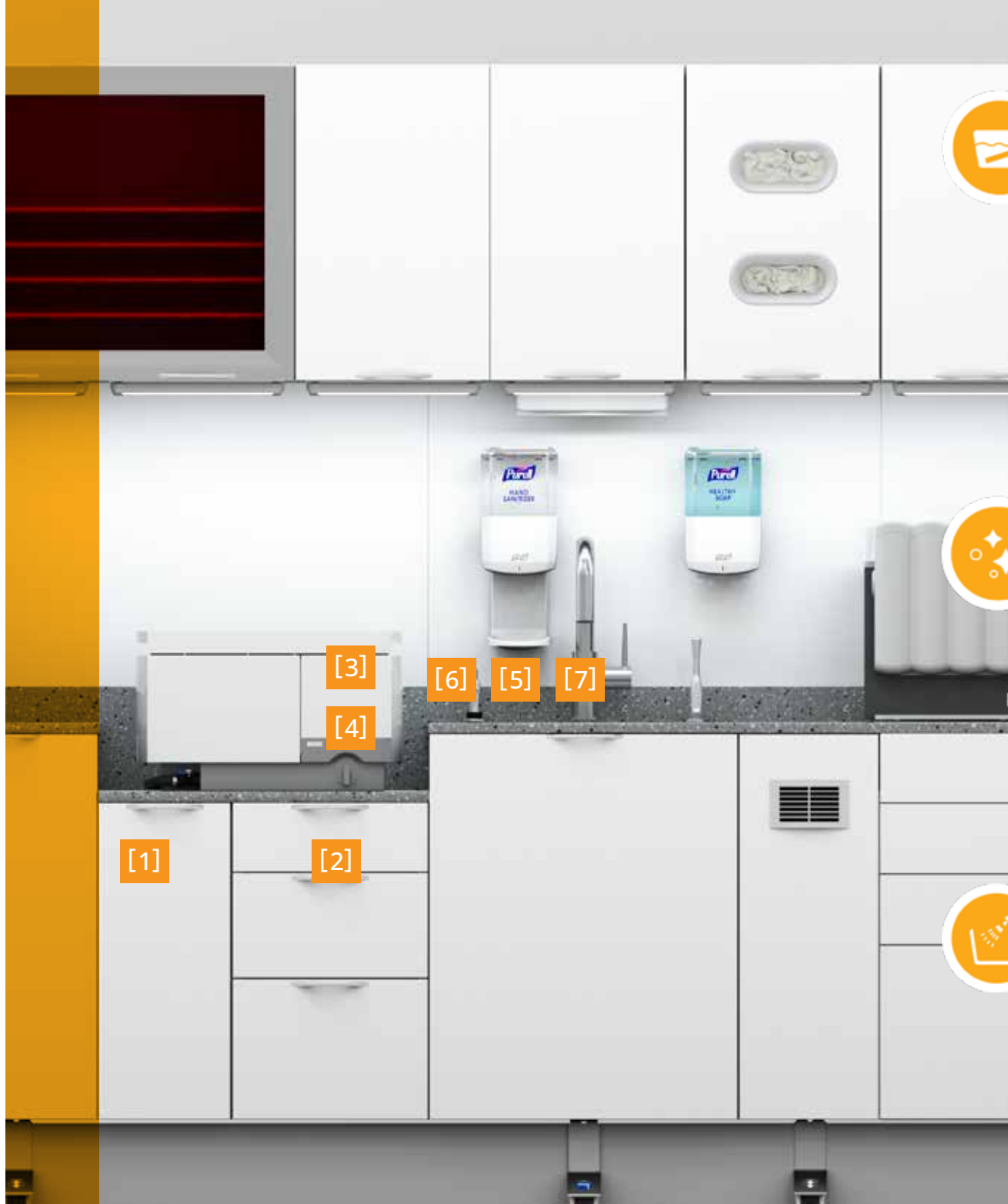



[1] INHIBEZ LA CHARGE BIOLOGIQUE

Des tiroirs de prétrempage spécialement conçus et moulés par injection, contiennent les instruments contaminés et empêchent la charge biologique de sécher en attendant le retraitement.



[2] ÉVITEZ LES DOMMAGES

Des tiroirs de prétrempage résistants aux déversements contiennent une solution de nettoyage enzymatique pour éviter d'endommager les instruments. Des paniers de transfert en acier inoxydable accélèrent le processus de transfert.



[3] SOYEZ FLEXIBLE

Les modules de réception peuvent accueillir des dispositifs de nettoyage automatisés, des nettoyeurs à ultrasons, des laveurs d'instruments et des dispositifs d'entretien de pièces à main de différentes tailles et marques.



[4] FACILITEZ-VOUS LA VIE

Les modules de table accessibles et abaissés sont parfaits pour décharger confortablement les bassins à ultrasons de table.



[5] RINCEZ INTELLIGEMMENT

Le robinet à tirette permet de rincer les instruments avec un jet ou un spray. Il est activé par la pédale, pour garder les mains libres pour le nettoyage et le rinçage.



[6] ÉLIMINEZ L'EXCÈS D'EAU

La seringue à air élimine l'excès d'eau et les débris de l'extérieur et de l'intérieur des instruments creux et des pièces à main.



[7] NETTOYEZ RAPIDEMENT

L'évacuateur à grand volume (HVE) nettoie les déversements et élimine les liquides des surfaces et des tiroirs de prétrempage.




DEUX ÉVIERS

Deux configurations distinctes de 594 offrent une certaine flexibilité si vous avez besoin de plusieurs évier.



ÉCONOMIE D'ESPACE

Le module de 60,9 cm (24 po) ou 71,1 cm (28 po) contient des bassins à ultrasons encastrés.

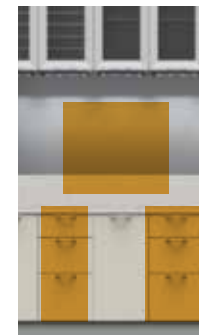

MODULES À ULTRASONS SUPPLÉMENTAIRES

Il est possible d'ajouter des modules de nettoyage par ultrasons de 60,9 cm (24 po) ou 71,1 cm (28 po) supplémentaires pour les cabinets et cliniques dentaires plus grands ou en expansion.



LUBRIFICATION ET RINÇAGE

En tant que dispositifs médicaux réutilisables, les pièces à main subissent un retraitement intensif après chaque utilisation. Si le centre de stérilisation n'est pas bien organisé et séquentiel, tout le cycle se bloque... et l'attente commence.



SÉCHAGE

Préparez et séchez efficacement la prochaine charge d'instruments pendant que le stérilisateur fonctionne, pour que le processus continue.



EMBALLAGE

Des fournitures organisées et des tiroirs de fournitures stratégiquement situés accélèrent le processus d'emballage.





[1] PROTÉGER VOTRE INVESTISSEMENT

La lubrification des composants internes de la pièce à main et l'élimination des débris réduisent la friction et prolongent la durée de vie de votre pièce à main.



[2] SÉCHEZ LES INSTRUMENTS

Le séchoir intégré garantit que les instruments sont parfaitement secs avant d'entrer dans l'autoclave, pour la longévité des deux.



[3] ÉLIMINEZ LES INCERTITUDES

Le séchoir intégré comprend un capteur de mouvement marche/arrêt au-dessus de la table. Un témoin lumineux signale que le séchoir est actif, ce qui permet de ne pas se demander si un cycle est en cours.



[4] AGRANDISSEZ L'ESPACE DE TRAVAIL

L'espace est trop cher? Configurez les tiroirs d'emballage sous le stérilisateur pour obtenir de la surface supplémentaire [environ 0,3 m² (4 pi²)].



[5] AJOUTER UN CODE DE COULEUR POUR PLUS DE CONFIANCE

Attribuez une couleur à chaque procédure et ces inserts de plateau permettront de créer une routine rationalisée et sans stress, de l'installation à la stérilisation.



[6] PROTÉGEZ VOS YEUX

L'éclairage précis des tâches par LED est agréable à l'œil pour l'inspection des instruments, avant de les emballer ou de les mettre en sachet.



ÉVIER POUR PETIT ESPACE

Un évier plus petit et moins profond augmente la flexibilité des petits espaces. Ajoutez un grand porte-gants utilitaire et un petit conteneur à déchets pour maintenir l'espace en ordre.



SÉCHOIR À INSTRUMENTS DE 25,4 CM (10 PO)

Configurez l'emplacement le plus pratique pour votre flux de travail. La durée du cycle de séchage est inférieure à celle du stérilisateur, ce qui peut réduire les inefficacités de transfert.



UNE FLEXIBILITÉ QUI VOUS CONVIENT

Ajoutez des modules de rangement et de dépôt des déchets de 35,5 cm (14 po), ou jusqu'à 2,8 m (112 po) pour les tables à hauteur unique.



STÉRILISATION

Les instruments dentaires sont des agents potentiels de transmission pathogène de patient à patient, de patient à médecin (et vice versa), ce qui place les professionnels de la santé dentaire en première ligne contre l'infection. Cela signifie que les processus que vous suivez et l'équipement que vous utilisez pour stériliser les instruments sont des outils essentiels pour protéger les patients et le personnel. La stérilisation est l'étape la plus essentielle du cycle de retraitement, mais également celle qui prend le plus de temps. Avec un centre de stérilisation efficace et systématique, vous pouvez maintenir une pratique sûre et saine, et gagner un temps précieux.





[1] MAINTENIR L'ORDRE

Avec un espace intégré désigné pour un stérilisateur (et l'option pour plusieurs), les équipes peuvent maintenir un flux de travail ordonné.



[2] AMÉLIOREZ LA TRAÇABILITÉ

Attacher des étiquettes de code à barres imprimées à chaque chargement permet de garantir la conformité avec les exigences d'étiquetage des emballages du CDC.



[5] CONTENEZ LES DÉVERSEMENTS

L'étagère étanche intégrée et coulissante est conçue pour accueillir des autoclaves de type cassette et pour protéger l'armoire et le sol contre d'éventuels déversements de liquides.




[3] DES GLISSIÈRES POUR PLUS DE COMMODITÉ

L'étagère coulissante est spécialement conçue pour supporter le poids du stérilisateur et protéger l'armoire et le sol des déversements et de l'humidité.



[6] SIMPLIFIEZ LE FLUX

Les inserts de tiroir sont disponibles dans de nombreuses configurations pour organiser le stockage et le flux des matériaux stérilisés.

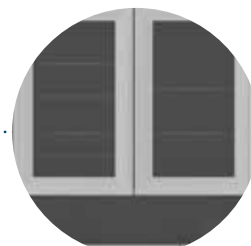

[4] ÉVITEZ LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA VAPEUR

Conçue pour l'environnement dentaire, la base supérieure de l'armoire en métal protège des jets de vapeur et empêche les dommages causés par l'humidité.

Évolutivité et
capacité



SÉPARATEURS D'EMPLACEMENT

Ajoutez des tours de stockage entre les zones de stérilisation pour diviser et organiser.



ESTHÉTIQUE

Assortissez vos autres inserts de placards, ou choisissez le bleu avec une porte à cadre en aluminium pour désigner visuellement le propre.



TOURS MULTIPLES

La possibilité d'ajouter jusqu'à 15 modules par configuration permet d'obtenir un processus de stérilisation efficace et sans difficulté, quelle que soit la taille du cabinet.



STOCKAGE ET CLASSIFICATION

Votre matériel et vos instruments sont correctement stérilisés. Conservez-les en lieu sûr dans un lieu de stockage qui protège les paquets d'instruments des déchirures, des perforations, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.



GESTION DES MATÉRIAUX

La planification et le contrôle du flux de matériaux et de fournitures sont essentiels au bon fonctionnement quotidien d'un cabinet. Des décennies d'expérience dans le secteur dentaire nous ont appris les détails complexes et les astuces organisationnelles qui font gagner du temps, qui maintiennent tout en place et encouragent le respect des processus et des protocoles.

Vous les trouverez ici.



...



[1] PERSONNALISEZ LE STOCKAGE

Chaque cabinet est différent, et notre concept modulaire permet à l'équipe dentaire d'organiser les matériaux en fonction du flux de travail.



[2] CHANGEZ D'AVIS

Vos matériaux doivent être placés dans une boîte, pas vous. Ces bacs entièrement personnalisables permettent de les disposer et de les réorganiser comme vous le souhaitez.




[3] BACS ET PLATEAUX DE PRÉPARATION

Des bacs personnalisables dans la station de préparation contiennent des articles pour préparer les plateaux et les boîtes aux procédures. La mise en place et le réapprovisionnement sont donc ordonnés et intuitifs.



[4] ÉLIMINATION ET APPROVISIONNEMENT

Organisez. Réorganisez. Supprimez. Nettoyez. Des bacs amovibles transparents permettent de gérer facilement les fournitures en un coup d'œil.

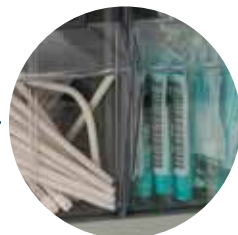

[5] ORGANISEZ EN TOUTE CONFIANCE

Une visibilité maximale signifie que vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin rapidement, et passer à autre chose de manière efficace.



[6] PERSONNALISEZ LES TIROIRS

Les sections divisées et la disposition flexible des bacs d'organisation permettent de personnaliser une installation productive pour votre cabinet.



[7] BACS BASCULANTS

Des bacs transparents et inclinables permettent de voir facilement ce qu'il y a à l'intérieur, tout en gardant les fournitures bien rangées.



[8] REPOSITIONNEZ EN CONSÉQUENCE

Les supports de stockage d'instruments en grillage métallique sont facilement déplaçables et permettent d'accueillir de grands plateaux et des cassettes.

Évolutivité et
capacité



FLEXIBILITÉ DU DÉMARRAGE ET DE L'ARRÊT

Parfois, l'espace (ou le budget) nécessite une configuration de stérilisation différente. La conception modulaire d'A-dec offre la souplesse nécessaire pour créer un système qui vous convient.



TOURS MULTIPLES

Quelle que soit la taille du cabinet, l'option « make-ready » personnalisable permet un accès efficace et un meilleur contrôle des stocks pour la gestion des matériaux.

CRÉÉ POUR LE SECTEUR DENTAIRE. CONÇU POUR L'ENVIRO



DES ÉTAGÈRES RÉSISTANTES À L'HUMIDITÉ

De solides étagères coulissantes et étanches contiennent des équipements de nettoyage automatisés et comportent une gouttière pour contenir les déversements et simplifier l'évacuation des liquides.

ORGANISATION INTELLIGENTE

Les supports de stockage des instruments sont conçus pour accueillir de grands plateaux et des cassettes. (Ils sont également durables, simples à enlever et faciles à nettoyer.)

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL À COULEURS ASSORTIES

Un éclairage de travail DEL intégré et précis éclaire la table d'une lumière douce pendant que vous travaillez. Efficacité énergétique et couleur assortie aux lampes dentaires à DEL A-dec.

TRÈS RÉSISTANT

Conçues pour l'environnement dentaire, les poignées revêtues de poudre ne s'usent pas et ne ternissent pas pendant la durée de vie du produit.

NNEMENT DENTAIRE.



ROBUSTE ET DURABLE

Des fermetures à cames robustes, bandes de chant en PVC de 2 mm, des surfaces intérieures en mélamine et des charnières européennes très résistantes sont des éléments qui contribuent à maximiser la durée de vie des armoires et leur valeur à long terme.

BASE SANS CORROSION

L'embase en acier de gros calibre est prétraitée avec une finition en poudre de polyester qui protège contre la rouille et la corrosion. L'embase est amovible pour le nivellement et l'accès.




TESTS RIGoureux

Les matériaux de surface et des armoires sont chimiquement sûrs et scrupuleusement testés pour résister aux procédés intrinsèquement rudes des centres de stérilisation.

AVEC UNE TELLE FLEXIBILITÉ, rien ne vous arrête.


La conception modulaire de la série 594b vous donne la liberté de vous arrêter, de démarrer et d'installer votre solution autour de n'importe quel poteau, pilier ou mur.

La flexibilité est réinventée.

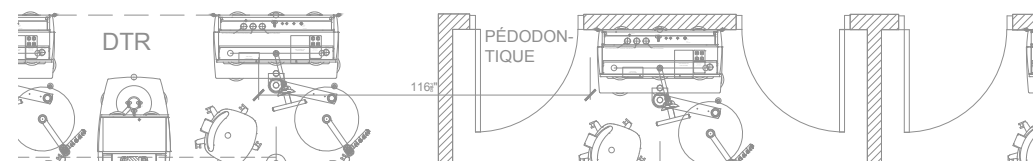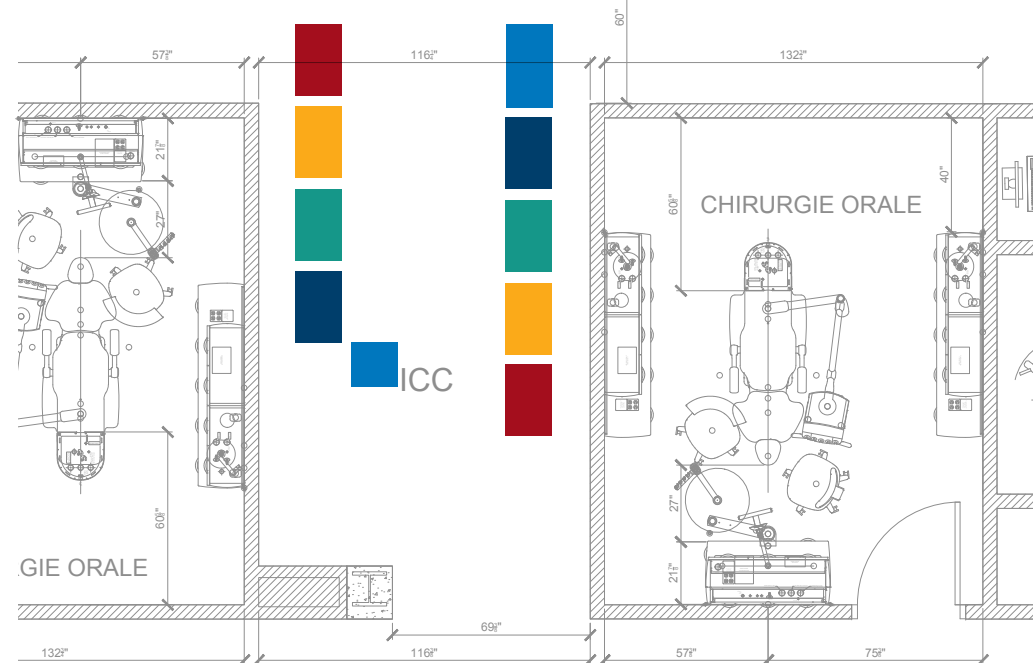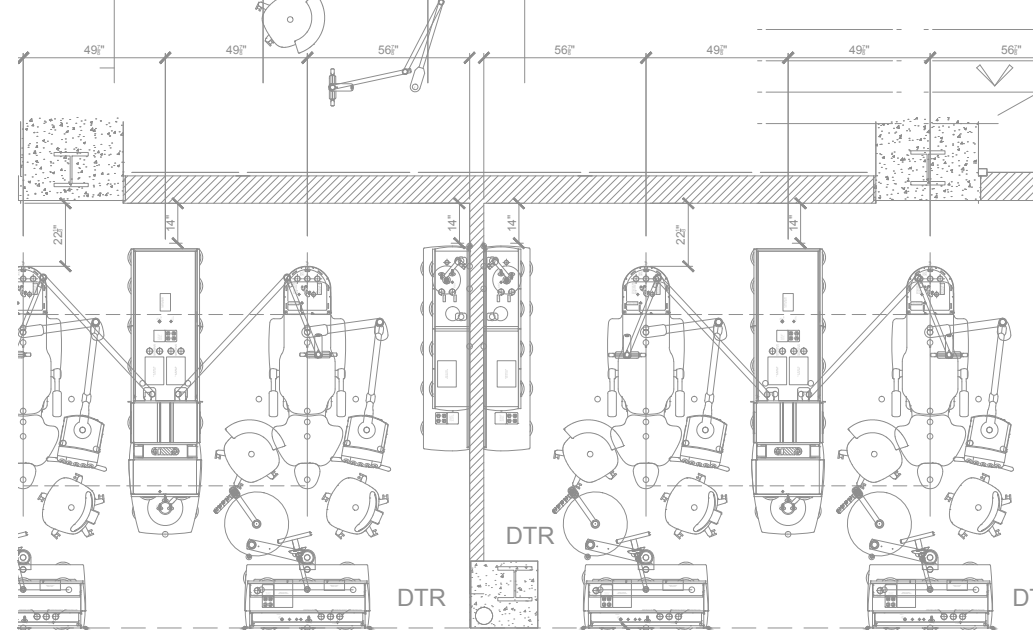


CAPACITÉ ÉVOLUTIVE


Cela permet de maximiser l'espace d'entraînement, quelle que soit la taille.

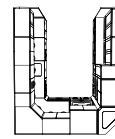


EN FORME DE U
Centre de stérilisation

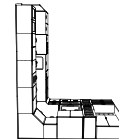

EN FORME DE L
Centre de stérilisation

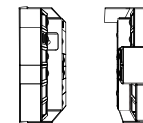

GALERIE
Centre de stérilisation

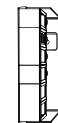

DROIT
Centre de stérilisation



COMPACT POUR LES PETITS CABINETS

Des modules flexibles permettent aux cabinets de petite taille d'intégrer dans le plan un centre de stérilisation compact et efficace. Celui-ci offre de la place pour le retraitement, ainsi que 2,4 m (8 pi) de stockage supplémentaire.




UNE GRANDE CAPACITÉ POUR UN GRAND VOLUME

Les grandes cliniques, les DSO et les écoles doivent traiter un grand nombre d'instruments, dans un espace qui peut accueillir plusieurs membres de l'équipe. Cet exemple est de 22 pieds (6,7 m).

Les embouts d'adaptation permettent de connecter plusieurs configurations.

Un embout d'adaptation associé à une cloison constitue une barrière physique entre les zones de réception et de nettoyage, et de préparation et d'emballage.

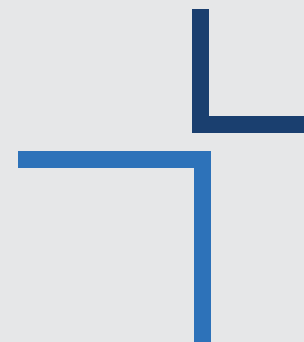

Siège d'A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 États-Unis
Tél. : +1 800 547-1883 depuis le Canada et les États-Unis
Tél. : +1.503.538 7478 depuis l'étranger
Télécopie : +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australie

Tél. : 1.800.225.010 depuis l'Australie
Tél. : +61.(0)2.8332.4000 hors d'Australie

A-dec Chine

Tél. : 400.600.5434 depuis la Chine
Tél. : +86.571.89026088 hors de Chine

A-dec Royaume-Uni

Tél. : 0.800.233285 depuis le Royaume-Uni
Tél. : +44.(0).24.7635.0901 hors du Royaume-Uni



©2022 A-dec Inc. Tous droits réservés.

Les couleurs et les produits présentés peuvent varier par rapport aux matériaux réels et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur A-dec agréé pour obtenir des échantillons de couleurs précis et les informations les plus récentes sur les produits.

Toutes les marques commerciales mentionnées dans ce document sont soumises aux droits des marques d'A-dec, de ses filiales et de leurs fournisseurs collectifs aux États-Unis et dans les pays étrangers.

